

# BENUTZERHANDBUCH

Shiatsu Nacken & Schulter Massagegerät  
Artikelnummer: 70606



## Wichtig:

Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch dieses Gerätes alle Anweisungen sorgfältig durch.

## Sicherheitshinweise

Um Gefahren oder das Risiko eines elektrischen Schlages, von Verbrennungen oder sonstigen Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise:

- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch oder vor einer Reinigung aus der Steckdose.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Badens oder in der Dusche.
- Lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder Spüle stürzen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
- Verwenden Sie niemals Klammern oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
- Halten Sie das Gerät trocken - nicht im nassen oder feuchten Zustand betreiben.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromanschluss verbunden ist.
- Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit Behinderung verwendet wird.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen oder beschädigt oder in Flüssigkeiten wie z. B. Wasser fallen gelassen wurde.
- Halten Sie das Kabel von den beheizten Flächen des Gerätes fern.
- Verwenden Sie das Gerät niemals während des Schlafens. Schlafen Sie während der Benutzung des Massagegerätes niemals ein.
- Führen Sie niemals irgendwelche Gegenstände in eine Öffnung des Gerätes ein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Erwärmung kann auftreten oder Feuer, Stromschläge oder Personenschäden verursachen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.

- Zum Ausschalten des Gerätes stellen Sie alle Bedienelemente auf "Aus" und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nur für den persönlichen, nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei einem Säugling, Personen mit Behinderung oder auf einer schlafenden oder unbewussten Person.
- Zerdrücken Sie das Gerät nicht. Vermeiden Sie scharfe Falten.

### **Achtung:**


Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen sorgfältig durch.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit unzureichender Erfahrung und / oder Kenntnis verwendet werden, es sei denn, unter der Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder wenn sie in der Verwendung des Gerätes unterrichtet worden sind.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt, wenn
  - Sie schwanger sind,
  - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben,
  - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Kreislaufstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, gerissene Haut, Entzündung der Venen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um medizinische Behandlungen zu ergänzen.
- Wenn Sie während der Massage Schmerzen oder Unannehmlichkeiten haben, hören Sie sofort auf und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, besonders wenn Kinder in der Nähe sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals direkt an geschwollenen oder entzündeten Gebieten oder an Hautausschlägen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht vor dem Schlafengehen. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann den Schlaf verzögern.

## Technische Daten:

Bezeichnung	Shiatsu Nacken & Schulter Massagegerät		
Modellnummer	70606	Leistung	24W
Eingangsspannung	12V DC / 2A		

## Bedientasten:

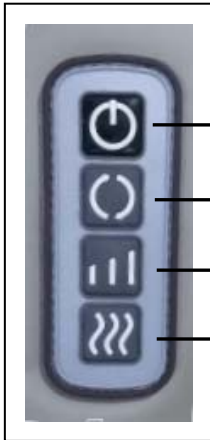

Power-Taste: AN / AUS

Massagerichtung (Vorwärts / Rückwärts)

Massagegeschwindigkeit (niedrig / mittel / hoch)

Wärme-Taste: AN / AUS

## Inbetriebnahme und Nutzung:

**Schritt 1:** Überprüfen Sie das Produkt und das Kabel des Netzadapters sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen und vergewissern Sie sich, dass das Gerät im einwandfreien Zustand ist.

**Schritt 2:** Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose und schließen Sie das Massagegerät an. Nehmen Sie angemessene Anpassung am Massagegerät vor, um das Gerät an die richtige Massageposition Ihres Körpers anzupassen.

**Schritt 3:** Drücken Sie die Power-Taste 1 Mal, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät befindet sich im automatischen Massageprogramm, die Wärmefunktion ist aktiviert, die Massagegeschwindigkeit befindet sich auf mittlerer Stufe und die Massagerichtung wechselt jede Minute.

**Schritt 4:** Drücken Sie die Richtungstaste, die Massagerichtung wird geändert und läuft kontinuierlich in eine Richtung.

**Schritt 5:** Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, die Massagegeschwindigkeit wird in der folgenden Reihenfolge geändert: von „mittel“ zu „hoch“, von „hoch“ zu „niedrig“ und von „niedrig“ zu „mittel“.


**Schritt 6:** Drücken Sie die Wärme-Taste, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten.

**Schritt 7:** Wenn das Produkt unbeaufsichtigt ist, drücken Sie bitte die Power-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Bitte beachten Sie: Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät nach 15 Minuten automatisch abgeschaltet.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Massagegerät kann an Nacken & Schultern, Hals, Rücken, Taille, Bauch, Oberschenkel oder Beine angewendet werden.

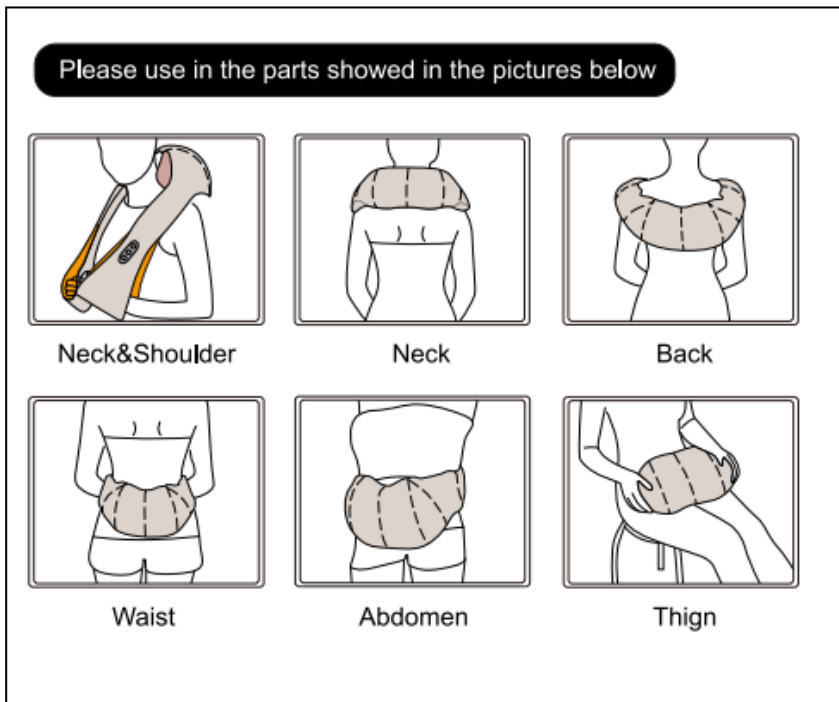

### **Reinigung und Instandhaltung:**

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung getrennt ist. Das Gerät darf nur mit einem sauberen, weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Bürsten, aggressive Reinigungsmittel, Benzin, Verdünnern oder Alkohol. Achten Sie darauf das Kabel nicht zu beschädigen.

### **Service und Garantie**

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben. Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungs- und Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Adresse: arcotec GmbH, Hertzstrasse 15, 30827 Garbsen, Deutschland, Tel.: 05131 / 46 58 90, E-Mail: [info@arcotec.de](mailto:info@arcotec.de)

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt arcotec GmbH, dass der Artikel “ Shiatsu Nacken & Schulter Massagegerät“, Artikelnummer 70606, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist. Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetseite [www.arcotec.de](http://www.arcotec.de) abgerufen werden.