

hee
ALLERGI HELFER
Allergiker Lichttherapie

- ✓ Wirksame Linderung von allergischer Rhinitis und Heuschnupfen
- ✓ Kann neben Medikamenten verwendet werden
- ✓ Leicht und tragbar
- ✓ Ersatz Nase Sonde Abdeckung für mehrere Personen verwenden



Benutzerhandbuch

Issue date: 2018-08-20
Version: A1

Model No:MC-001

Inhalt

Einführung.....2

Teile.....3

Warnungen3

Verwendung des Allergie-Helfers..... 4

Batterieinformation.....5

Spezifikation.....6

Fehlerbehebung.....7

Wartungs- und Vorsichtsmaßnahmen..... 7

Lagerung.....7

Verfügung.....8

Garantie.....8

Kundenbewertung 9

Erklärung der Symbole auf dem Allergie-Helfer..... 10

Einführung

Danke, dass Sie Hee Allergy Reliever gewählt haben!

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Hee Allergy Reliever ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA und klinisch erprobtes Produkt.

Das Gerät bietet die wirksame Behandlung von allergischer Rhinitis einschließlich Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinitis) sowie die Linderung der Symptome von Heuschnupfen. Es bietet nasale Allergiesymptomlinderung, verursacht durch Außen- und Innenallergene wie Gräserpollen, Katzenhaare und Hausstaubmilben.


Hee Allergy Reliever verwendet Lichttherapie mit zwei spezifischen Wellenlängen, um die Symptome der allergischen Rhinitis sanft zu lindern. Das Gerät kann alleine oder neben Ihren normalen Allergie-Medikamenten verwendet werden.

Es ist frei von Drähten, einfach zu tragen und zu benutzen!

Teile

Einstellungsknopf

Nasenschutzabdeckung

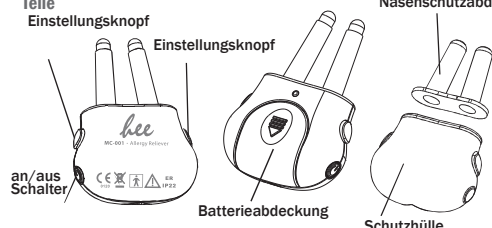

an/aus Schalter

Batterieabdeckung

Schutzhülle

Warnungen

- ✓ Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vom Patienten selbst verwendet werden kann.
- ✓ Patienten können das Produkt ohne professionelle medizinische Hilfe selbst verwenden.
- ✓ WARTUNG des Produkts sollte nicht bei jeder Behandlung erfolgen. Alle Funktionen des Produkts können vom Patienten verwendet und bedient werden.
- ✓ Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.
- ✓ Kinder unter 16 Jahren müssen bei der Verwendung dieses Produkts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- ✓ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ✓ Das Gerät enthält kleine Teile, die verschluckt werden können. Bei Verschlucken, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.
- ✓ Nicht geeignet für Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten medizinischen Geräten.

- ✓ Nicht geeignet für Personen mit Nasenpolypose, empfindlicher Haut in der Nase oder mit schlechter Durchblutung.
- ✓ Blicken Sie niemals direkt in die ausgesandten Lichtstrahlen, auch nicht bei Verwendung eines optischen Instruments (z. B. Brille).
- ✓ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder anästhetischen Gasen.
- ✓ Verwenden Sie das Gerät nicht sofort, wenn Sie während der Behandlung irgendwelche Beschwerden oder Schmerzen verspüren. Wenn die Beschwerden bestehen bleiben, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- ✓ Verwenden Sie immer das vom Hersteller angegebene Zubehör

Verwendung des Allergie-Helfers

Wischen Sie Nasenschutzabdeckungen vor dem Gebrauch gründlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab

Batterien installieren und ersetzen

Verwenden Sie bei der Installation oder dem Austausch der Batterie ein Werkzeug (z. B. "dünne Metallstange"), um auf das kleine runde Loch auf der Rückseite des Geräts zu drücken, und entfernen Sie die Batterieabdeckung. Und dann legen Sie die 2 Batterien (2 x CR2032 Alkaline) ein und ersetzen Sie sie, achten Sie auf die richtige Polarität. Schliessen Sie die Batterieabdeckung endgültig

Behandlungsbeginn

Legen Sie die Nasensondenabdeckungen auf das Gerät. Dies schützt das Gerät vor jeglicher Flüssigkeit, die es beschädigen könnte. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt, die beiden Wellenlängen sind nun aktiviert und die roten Lichter leuchten auf.

Hinweis:

Wenn die Batterien fast leer sind und ausgetauscht werden müssen, blinkt das rote Licht und eine schwache Batterieanzeige ertönt. Führen Sie die beiden Nasensonden durch Drücken der beiden einstellbaren Tasten so weit wie möglich in die Nase ein. Die Behandlung dauert 3 Minuten und das Gerät schaltet sich nach Abschluss der Behandlung automatisch aus. Es werden zwei aufeinander folgende Signaltöne ausgegeben, um Sie auf das Behandlungsende aufmerksam zu machen. Entfernen Sie die Sonden durch Drücken der beiden Einstellungsknöpfe. Reinigen Sie die Nasensondenabdeckungen nach jedem Gebrauch gründlich. Anweisungen finden Sie unter **Wartung und Vorsichtshinweise**. Es wird empfohlen, 2 Mal täglich und 5-6 Stunden zwischen den einzelnen Behandlungen zu verwenden.

Hinweis:

Das Gerät kann jederzeit ausgeschaltet werden, indem Sie den Ein- / Ausschalter eine Sekunde lang gedrückt halten. Verwenden Sie das Gerät nicht sofort, wenn Sie während der Behandlung irgendwelche Beschwerden oder Schmerzen verspüren. Wenn die Beschwerden bestehen bleiben, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Batterieinformation

- Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Batterien alle 12 Monate wechseln.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Arten von Batterien.

- Warnung: Wenn Batterien auslaufen und in Kontakt mit Haut oder Augen kommen, sofort mit reichlich Wasser abwaschen.
- Batterien müssen von einem Erwachsenen gehandhabt werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort Arzt hinzuziehen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.
- Entnehmen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den Anweisungen des Batterieherstellers.

Spezifikation

Modell: MC-001

Produktname: Allergie-Helfer

Stromversorgung: 2 x CR2032 alkalisch

Behandlungstechnologie: Lichttherapie mit zwei Wellenlängen

Verwendete Wellenlänge: Rotlicht 660 nm (+/- 5 nm)
Infrarotlicht 940nm (+/- 10nm)

Verwendung: Ungefähr 3 Minuten, zweimal pro Tag

Lager- und Transportbedingungen: -20° C-55° C / weniger als 93% RH

Betriebsbedingungen: 5° C-40° C / 30%-80% RH

Abmessungen: ca. 60 x 44 x 21 mm

Produktgewicht: 18g (ohne Batterien)

Batterielebensdauer: ca. 30 Anwendungen (3 Min. pro Benutzung)

Schutzart: IP22

HINWEIS: Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Sind die Batterien leer?	Ersetzen Sie die Batterien
	Sind die Batterien richtig eingelegt?	Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Wartungs- und Vorsichtsmaßnahmen

- ✓ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Nicht fallen lassen.
- ✓ Verwenden Sie keine Chemikalien, um das Gerät zu reinigen. Falls Sie sie reinigen müssen, wischen Sie bitte mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- ✓ Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und schützen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Lagerung


- ✓ Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
- ✓ Bewahren Sie das Produkt nach dem Gebrauch sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ✓ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- ✓ Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen werden.
- Auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen.

Verfügung

Benutzte, vollständig entladene Batterien müssen in einem speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, an Giftmüllsammelstellen oder bei einem Elektrofachhändler entsorgt werden. Sie sind gesetzlich zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Batterien verpflichtet.

Hinweis: Diese Markierungen finden Sie bei Batterien mit schädlichen Substanzen:


Pb=Blei enthaltende Batterie,
Cd=Batterie, die Cadmium enthält,
Hg=quecksilberhaltige Batterie.



Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU-WEEE (Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden.

Erklärung der Symbole auf dem Allergie-Helfer

- Siehe Bedienungsanleitung (Die Hintergrundfarbe des Zeichens: blau; Das grafische Zeichen des Zeichens: weiß)
- Vorsicht!
- Dieses Symbol zeigt an, dass der Allergie-Helfer ein Gerät vom Typ BF ist
- Entsorgung gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU (WEEE)
- Der Name und die Adresse des Herstellers
- Herstellungsdatum
- Batch-Code
- Modell-Nr
- Symbol für "Produktschutzstufe"
- Bleib trocken
- Name und Anschrift des bevollmächtigten Vertreters in der Europäischen Gemeinschaft
- Entspricht der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42 / EWG) und den Anforderungen der Richtlinie 2007/47 / EG, Benannte Stelle SGS UK
- Freigestellte Gruppe gemäß EN 62471: 2008



Erklärung der Symbole auf dem Allergie-Helfer

- Siehe Bedienungsanleitung (Die Hintergrundfarbe des Zeichens: blau; Das grafische Zeichen des Zeichens: weiß)
- Vorsicht!
- Dieses Symbol zeigt an, dass der Allergie-Helfer ein Gerät vom Typ BF ist
- Entsorgung gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU (WEEE)
- Der Name und die Adresse des Herstellers
- Herstellungsdatum
- Batch-Code
- Modell-Nr
- Symbol für "Produktschutzstufe"
- Bleib trocken
- Name und Anschrift des bevollmächtigten Vertreters in der Europäischen Gemeinschaft
- Entspricht der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42 / EWG) und den Anforderungen der Richtlinie 2007/47 / EG, Benannte Stelle SGS UK
- Freigestellte Gruppe gemäß EN 62471: 2008